


ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

# CELLUMAX

relax in style



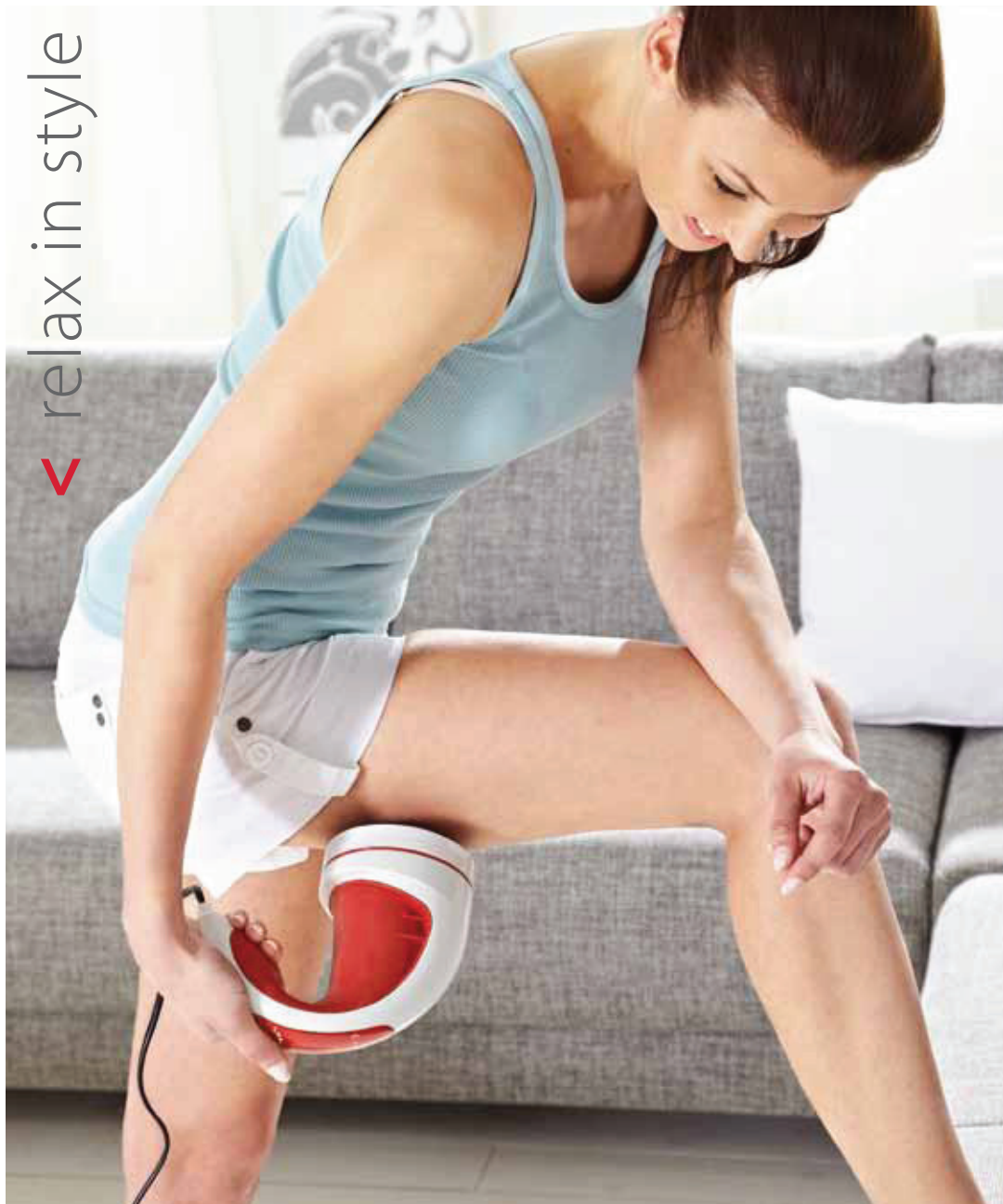

time to *relax*

WITH CASADA

С момента своего основания в 2000 году название CASADA ассоциируется с высококачественными продуктами в области здоровья и фитнеса.

Сегодня приборы CASADA можно приобрести более чем в 40 странах мира. Продукты CASADA постоянно совершенствуются, отличаются неповторимым дизайном и неизменной нацеленностью на улучшение качества жизни, они надежны и их качество безупречно.

## ПОЗДРАВЛЯЕМ

---

Купив этот массажер, Вы подтвердили, что заботитесь о своем здоровье. Просим Вас внимательно прочитать инструкцию по эксплуатации. Выполнение и соблюдение рекомендаций, указанных в Инструкции, позволит Вам наслаждаться массажем в течение длительного времени.

Желаем Вам провести много приятных минут с Вашим личным **CELLUMAX**.

- 5 Массаж
- 6 Правила безопасности
- 7 Начало эксплуатации
- 7 Технические характеристики
- 8 Комплектация/функции
- 10 Применение
- 12 Поиск неисправностей
- 12 Хранение
- 12 Декларация соответствия требованиям ЕС
- 13 Гарантийные условия



Каждый знает о благотворном влиянии расслабления напряженных мышц, достигаемом с помощью массажа. Процессы, имеющие место внутри мышц, кровеносных сосудов и нервных стволов объясняются просто.

В организме существуют две транспортные системы. Система кровообращения, перекачивающая кровь от сердца, обеспечивает мозг, органы и мускулатуру питательными веществами и жизненно важным кислородом, а лимфатическая система заботится о том, чтобы продукты обмена, шлаки и токсины были выведены из организма.

Если иммунная система подвергается воздействию инфекций и вирусов, врач в первую очередь прощупывает лимфатические узлы, так как они производят защитные клетки, которые реагируют на нагрузку и увеличиваются.

Любой массаж стимулирует данную систему и способствует выводу вредных веществ и обеспечению кислородом и питательными веществами.

## ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ



Перед началом эксплуатации аппарата для массажа внимательно прочтите следующие правила, чтобы достичь безупречного функционирования прибора и его оптимального воздействия. Просьба сохранять Правила в течение всего времени эксплуатации.

- Массажный аппарат соответствует общепринятым техническим принципам и современным требованиям к безопасности.
- Аппарат не требует специального обслуживания. В случае возможных неполадок ремонт может производиться только уполномоченными специалистами. Нецелевое применение аппарата и неавторизованный ремонт запрещены из соображений безопасности и приведут к утрате гарантий.
- Никогда не трогайте вилку мокрыми руками.
- Избегайте попадания на аппарат воды, не подвергайте воздействию высоких температур и прямых солнечных лучей.
- Если аппарат длительное время не используется, отсоедините кабель питания от розетки, чтобы избежать короткого замыкания.
- Не используйте аппарат с поврежденной вилкой, шнуром или разболтанными местами крепления. Если вилка или шнур повреждены, их следует заменить у производителя, в сервисном центре или с привлечением квалифицированного персонала. При нарушениях в работе немедленно отключите аппарат от электропитания. Использование не по назначению или неправильное использование исключают всякую ответственность производителя за причиненный ущерб.
- Дети могут пользоваться аппаратом только под присмотром взрослых.
- Чтобы не превышать уровень воздействия на мышечную и нервную системы, не нарушайте рекомендованное время массажа в 15 минут.
- Никогда не используйте острые предметы во время пользования массажером.
- Любой массаж, даже массаж ступней противопоказан, если Вы беременны или если **область массажа** подвержена одному из перечисленных заболеваний: недавние травмы, тромбозы, воспаления и опухоли любого происхождения, а также рак. Для использования аппарата в лечебных целях рекомендуется консультация с врачом.
- Если Вы используете электронные приборы, например сердечный стимулятор, **каждый раз** перед массажем Вам необходимо проконсультироваться с врачом.

## НАЧАЛО ЭКСПЛУАТАЦИИ

### ПОДКЛЮЧЕНИЕ КАБЕЛЯ

- Перед началом эксплуатации проверьте соответствие напряжения в сети напряжению, указанному на штепсельной вилке прибора и присоедините прибор к сети. После этого включите массажный аппарат при помощи пульта управления.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размер:	18,5 x 11 x 17,5 см
Вес:	1 кг
Напряжение:	Переменный ток 220 В, 50 Гц
Номинальная мощность:	25 Вт

Сертификация:



## КОМПЛЕКТАЦИЯ/ФУНКЦИИ



**CELLUMAX** обеспечивает глубокий массаж. Две разные, легко заменяемые массажные насадки различным образом активизируют нервную систему и систему кровообращения. Другими словами, активизируется кровоснабжение массируемых участков. Применение отличается простотой: с помощью контрольного диска **CELLUMAX** плавно переключается скорость. Встроенная функция нагрева повышает глубину воздействия. С помощью **CELLUMAX** можно, например, просто и эффективно вmassировать антицеллюлитный крем (без сетчатой крышки-насадки).

Насадку можно снять и промыть. Специально изогнутая ручка с противоскользящим слоем сконструирована так, чтобы обеспечить простое и надежное использование данного прибора.

## КОМПЛЕКТАЦИЯ/ФУНКЦИИ



**[1] ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ КОНТРОЛЬНОГО ДИСКА / ИНТЕНСИВНОСТЬ**

**[2] ПЛОСКАЯ МАССАЖНАЯ НАСАДКА**

Данная насадка обеспечивает мягкий массаж для особо чувствительных зон таких, как например, лицо (использовать только с сетчатой крышкой-насадкой, так как во вращающемся приборе могут запутаться волосы).

**[3] КРУГЛАЯ МАССАЖНАЯ НАСАДКА**

Форма данной насадки обеспечивает восстанавливающий массаж: нервная система и система кровообращения активизируются, кровоток стимулируется. Она особенно подходит для применения с антицеллюлитным кремом (предварительно снять сетчатую крышку-насадку).

## ПРИМЕНЕНИЕ

**CELLUMAX** массирует соединительную ткань и стимулирует кровоснабжение, а также выведение токсинов. Он оказывает воздействие на внутренний жир, согревает и дренирует его. Благодаря использованию **CELLUMAX** Вы можете «формировать» фигуру, массировать уставшие и напряженные участки тела и одновременно разглаживать «апельсиновую корку» в проблемных зонах.

При этом не забывайте следить за своим весом, так как излишний вес приводит к усиленному накоплению жира в жировых клетках. По указанной причине особенно важно сбалансированное питание. Целенаправленные упражнения для области бедер, живота и ног подтягивают мускулатуру и стимулируют сжигание жира. Даже 20 минут занятий в день приводят к заметным изменениям. Также рекомендуется заниматься различными видами спорта.

В результате массажа стимулируется кровообращение и обмен веществ. После душа необходимо облить ноги и область бедер холодной водой. Также обратите внимание на негативное воздействие никотина - кровеносные сосуды кожи сужаются, а обмен веществ затрудняется.



## ПРИМЕНЕНИЕ



## ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ

НЕИСПРАВНОСТЬ	УСТРАНЕНИЕ
<ul style="list-style-type: none"> <li>Аппарат подключен к сети питания, но ни сам прибор, ни пульт дистанционного управления не работают.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Проверьте присоединение к сетевому кабелю.</li> <li>При очень долгом использовании аппарат может перегреться. Выключите его и дайте охладиться в течение 30-40 минут.</li> </ul>

## ХРАНЕНИЕ

1. Рекомендуется хранить в сухом, защищенном от пыли месте с размотанным кабелем.
2. Не хранить рядом с системами отопления и открытым огнем. Не подвергать непосредственному воздействию солнечных лучей.

## ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ ЕС

Соответствует Директиве 2006/95/ЕС

## ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ

Компания-продавец предоставляет предусмотренный законом срок гарантии на изделие, описание которого дано в гарантийном талоне. Срок гарантии начинается с даты покупки. Дата покупки указывается на товарном и кассовом чеках.

В случае если дефект изделия будет обнаружен в пределах Германии, то такое изделие будет бесплатно отремонтировано или заменено. Вышеуказанное не распространяется на быстроизнашивающиеся детали такие как, например, материал покрытия. В данном случае прибор вместе с товарным и кассовым чеками должен быть отправлен для ремонта в соответствии с условиями и сроками гарантийного периода.

Претензия по гарантии не принимается, если причиной обнаруженного дефекта является внешнее воздействие или последствия ремонта или изменения конструкции, которые были произведены не компанией-производителем или авторизованной компанией-продавцом.

Гарантия, предоставляемая продавцом, ограничивается ремонтом или заменой изделия. В рамках данной гарантии продавец не берет на себя дальнейшей ответственности и не отвечает за ущерб, причиненный в результате несоблюдения правил эксплуатации и (или) неправильного использования изделия.

Если в результате проверки изделия компанией-продавцом будет установлено, что претензия по гарантии относится к дефекту, на который не распространяется гарантия, или что срок гарантии уже истек, расходы по проверке и ремонту оплачивает покупатель.

### Производитель

Casada GmbH  
Obermeiers Feld 3  
33104 Paderbon, Germany  
Tel.: (+49) 52 54 9 30 98 0  
www.casada.de  
info@casada.de


### Эксклюзивный представитель в России

ООО «Альфа Бизнес Кооперэйшн»  
142784, Московская область, дер. Румянцево  
Бизнес Парк «Румянцево», стр.2, оф. 412В  
Тел.: (+7) (495) 228 32 93  
www.casada.ru  
info@casada.ru

Авторское право на изображения и тексты принадлежит « Casada GmbH», они не могут быть использованы иначе, нежели с явного согласия владельца.  
**Copyright © 2010 « Casada GmbH». Все права защищены.**





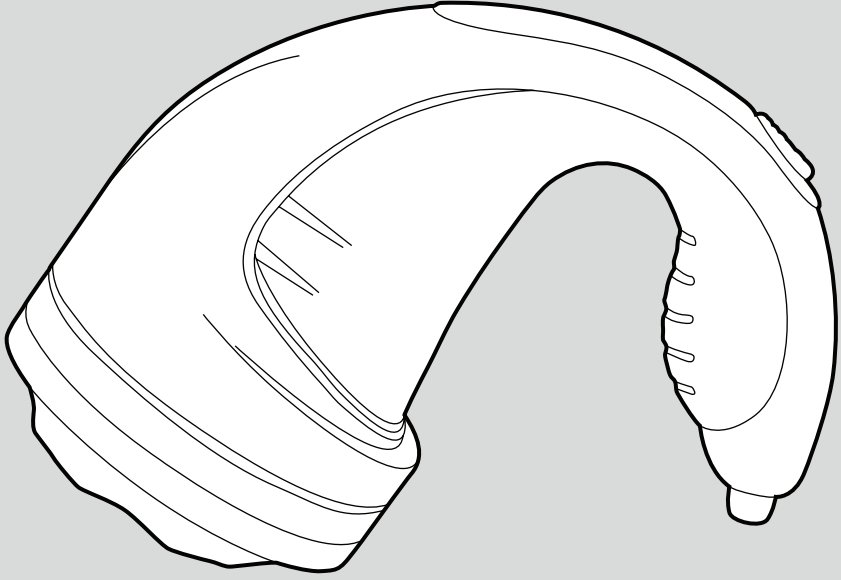

< relax in style