

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

QUATTROMED III


< relax in style





СОДЕРЖАНИЕ

- 5 Указания по технике безопасности
- 6 Медицинские указания
- 6 Указания по уходу
- 7 Области применения
- 8 Управление с помощью пульта дистанционного управления
- 9 Для мобильного использования
- 9 Функции
- 10 Гарантийные правила
- 10 Ввод в эксплуатацию
- 10 Технические характеристики
- 11 Заявление о соответствии стандартам ЕС

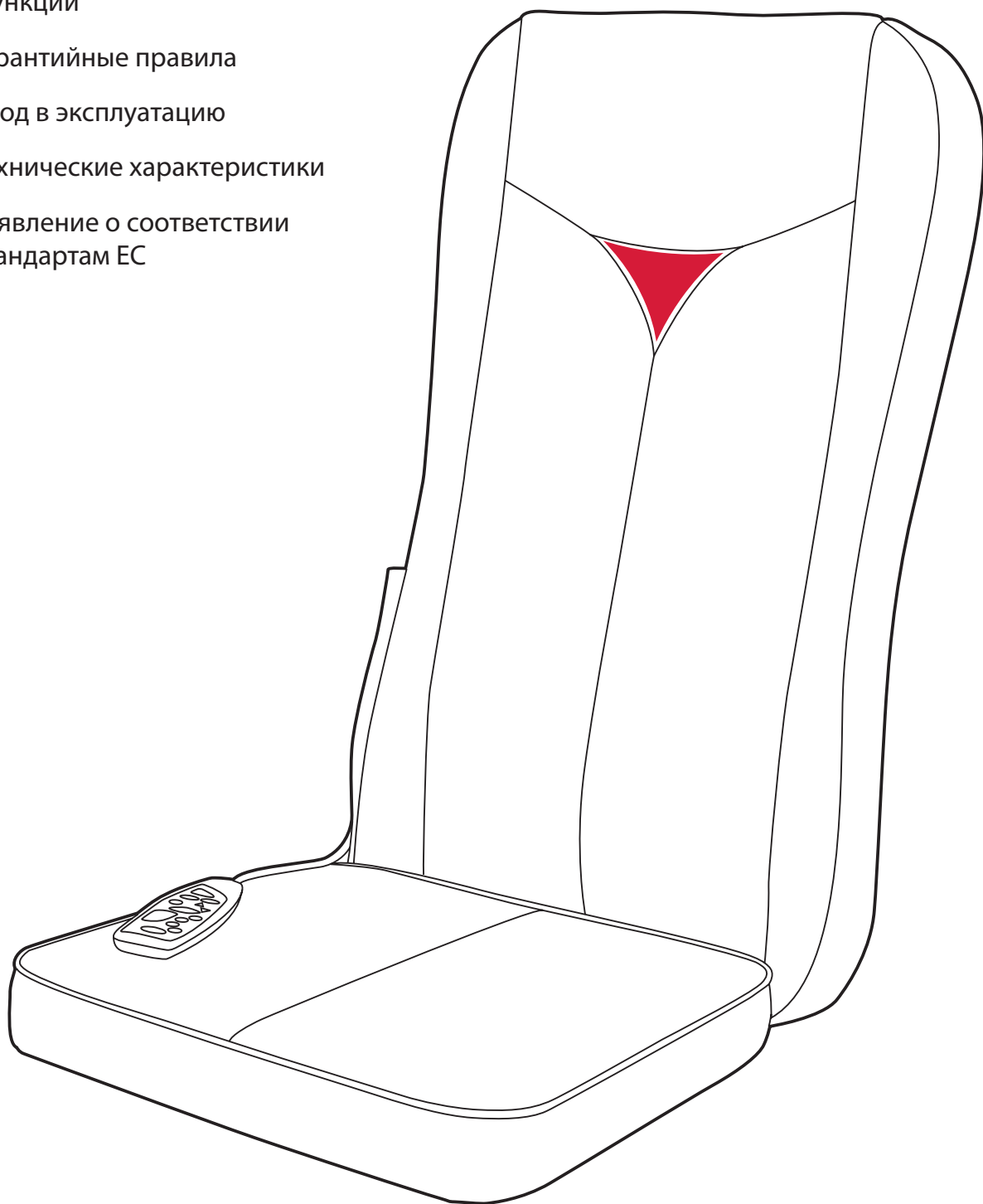



ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Купив массажную накидку, Вы подтвердили, что заботитесь о своем здоровье. Просим Вас внимательно прочитать Инструкцию по эксплуатации. Выполнение и соблюдение рекомендаций, указанных в Инструкции, позволит Вам наслаждаться массажем в течение длительного времени.

Надеемся, что Вы получите истинное удовольствие от использования массажной накидки **QUATTROMED III**.

УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Пожалуйста, очень внимательно прочитайте Указания по технике безопасности, прежде чем использовать данную массажную накидку **QUATTROMED III** в соответствии с ее назначением. Если Вы страдаете каким-либо из перечисленных ниже заболеваний, перед использованием массажера проконсультируйтесь с врачом.

- Заболевания в стадии обострения;
- Заболевания сердечно-сосудистой системы;
- Остеопороз;
- Беременность;
- Онкологические заболевания;
- Нарушения восприятия;
- Прохождение курса лечения;
- Инвалидность.

ВНИМАНИЕ: Не касайтесь пальцами массажных головок! Это опасно!

Самостоятельное раскрытие массажера строго запрещено.

Если при использовании массажной накидки **QUATTROMED III** у Вас возникнут жалобы физического характера, немедленно обратитесь к врачу.

Чтобы избежать поражения током или нанесения повреждений, не разрешайте детям использовать массажер без присмотра.

Пожалуйста, не допускайте попадания воды на массажер и не подвергайте его воздействию слишком высоких температур.

Не используйте поврежденные штепсельные вилки, кабель или расшатанные патроны. Если штепсельная вилка или кабель повреждены, производитель, представители сервисной службы или квалифицированные специалисты должны их заменить.

Обращайтесь бережно с механическими и электрическими деталями массажера. Пожалуйста, не кладите на массажную накидку **QUATTROMED III** тяжелые предметы.

После использования или при неиспользовании массажера в течение длительного времени убедитесь, что он отключен от электросети, чтобы избежать опасности поражения током, короткого замыкания или пожара.

При сбоях в работе массажера сразу отключите его от электросети.

Не касайтесь штепсельных вилок мокрыми руками.

Не используйте массажные функции непосредственно после приема пищи, возможно появление тошноты.

МЕДИЦИНСКИЕ УКАЗАНИЯ

Во избежание чрезмерного раздражения мускулатуры и нервов время массажа не должно превышать рекомендуемые 30 минут.

Если Ваш врач/ортопед категорически не запретил Вам массаж спины, Вы без опасений можете наслаждаться массажем с помощью массажной накидки **QUATTROMED III**.

Массаж никогда не должен вызывать неприятных ощущений.

Чрезмерно интенсивный массаж может также навредить организму.

Беременным, больным и детям не следует пользоваться массажером. При повреждениях позвоночника и после операций массаж может быть опасен. В случае сомнений предварительно проконсультируйтесь с Вашим врачом.

УКАЗАНИЯ ПО УХОДУ

Вы приобрели изделие, изготовленное из высококачественных материалов. Оно требует определенного ухода. Избегайте попадания на него прямых солнечных лучей и воздействия влажности.

Регулярно обрабатывайте поверхность массажера рекомендуемыми продуктами по уходу, чтобы массажная накидка **QUATTROMED III** доставляла Вам удовольствие в течение длительного времени.



ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

В новой модели массажной накидки **QUATTROMED III** обычные массажные головки из пластика были заменены массажными головками из натурального нефрита. Природные силы нефрита усиливаются с помощью интегрированного нагрева. Естественное инфракрасное излучение становится интенсивнее и передает целительное тепло, проникающее в глубь мускулатуры. Нагревание камня происходит медленно, лишь через несколько минут Вы почувствуете тепло. В этой фазе нагревания вращающиеся движения массажных головок расслабляют ткани и устраняют поверхностные уплотнения и напряжения.

Подключаемый вибромассаж обеспечивает дополнительную возможность стимулирования циркуляции крови и работы лимфатической системы. Кровоснабжение стабильно улучшается, облегчается процесс выведения шлаков из организма.



SHIATSU (Шиатцу) – РОЛИКОВЫЙ И РАЗМИНАЮЩИЙ МАССАЖ

- > устраняет глубокие напряжения
- > укрепляет мускулатуру спины

ВИБРОМАССАЖ

- > активизирует лимфодренаж и циркуляцию крови

НАГРЕВ

- > усиливает воздействие в глубину



УПРАВЛЕНИЕ С ПОМОЩЬЮ ПУЛЬТА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ



- 1 С помощью адаптера, входящего в комплект массажной накидки **QUATTROMED III**, подсоедините ее к электросети. Нажатием кнопки «**POWER**» включается 15 минутный массаж. Для преждевременного окончания массажа еще раз нажмите на кнопку «**POWER**» - механизм автоматически возвращается в нижнюю позицию остановки.
- 2 Нажатием кнопки «**SHIATSU**» включается и выключается данный вид массажа.
- 3 При включенном массаже «**SHIATSU**» нажатием кнопки «**HEAT**» включается нагрев массажных головок.
- 4 Данная функция имеется в распоряжении только во время массажа «**SHIATSU**». Нажатием кнопок «**SPOT up**» и «**SPOT down**» выбирается движение массажных головок вверх и вниз. Повторное нажатие соответствующей кнопки останавливает механизм в желаемый момент.
- 5 Нажатием кнопки «**ROLLING**» включается и выключается роликовый массаж, осуществляемый в верхнем и нижнем направлении.
- 6 С помощью кнопки «**WIDTH**» во время роликового массажа можно изменить расстояние между массажными головками. (Возможно только в режиме роликового массажа).
- 7 С помощью кнопки «**FULL**» включается массаж всей спины. Нажатием кнопки «**UPPER**» массаж ограничивается областью плеч и затылка. Нажатием кнопки «**LOWER**» массаж осуществляется в области спины и поясницы.
- 8 Кнопкой «**SEAT**» включается и выключается вибромассаж в сидении.

ДЛЯ МОБИЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Для мобильного использования массажной накидки **QUATTROMED III** в комплект дополнительно входит адаптер на 12 вольт.



ФУНКЦИИ

Пожалуйста, расположите массажную накидку **QUATTROMED III** на устойчивом стуле или кресле.

Нагрузка весом тела усиливает действие массажа. Пожалуйста, следите за тем, чтобы все Ваше тело располагалось по центру, так чтобы массажные головки вращались параллельно к позвоночнику.

При роликовом массаже Вы можете регулировать расстояние массажных головок до позвоночника с помощью пульта управления. Через 15 минут массажер автоматически отключается.



ГАРАНТИЙНЫЕ ПРАВИЛА

На изделие, описанное на обороте, продавец предоставляет гарантийный срок, предусмотренный законом. Срок гарантии начинается с даты покупки. Дата покупки подтверждается чеком.

Все необходимые гарантийные условия указываются в гарантийном талоне, который является обязательным документом при продаже. Гарантия не распространяется на быстроизнашивающиеся компоненты, такие как тканевые покрытия. Условием для надлежащего оформления массажной накидки в ремонт является доставка имеющего дефект изделия вместе с чеком до истечения гарантийного срока.

Право на гарантийный ремонт теряет силу, если причиной обнаруженного дефекта является внешнее воздействие или последствия ремонта или изменений конструкции изделия, которые были произведены не изготовителем или неавторизованными лицами.

Предоставленная продавцом гарантия ограничивается ремонтом или заменой изделия. В рамках данной гарантии производитель или продавец не берет на себя прочей ответственности и также не несет ответственности за ущерб, причиненный в результате несоблюдения инструкции по эксплуатации и/или неправильного использования изделия.

Если в результате проверки изделия продавцом будет установлено, что гарантийное требование касается дефекта, на который гарантия не распространяется, или гарантийный срок уже истек, расходы по проверке и ремонту оплачивает покупатель.

ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Перед вводом в эксплуатацию проверьте, чтобы напряжение в сети соответствовало напряжению, указанному на штепсельной вилке. Если сетевой кабель еще не подсоединен, соедините его с адаптером и вставьте штепсельную вилку в розетку.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение: AC ~ 100-240 В, 50-60 Гц, 42 Вт, DC 12 В, 3500 мА

Продолжительность работы в автоматическом режиме: 15 минут

Размеры: 75 x 46 x 8 см

Вес: 7,8 кг

Сертификаты:



ЗАЯВЛЕНИЕ О СООТВЕТСТВИИ СТАНДАРТАМ ЕС

Изделие соответствует Европейским Директивам 2006/95/ЕС.

«Casada Group GmbH»

Обермайерс Фельд 3

33104 Падерборн, Германия

Тел.: (+049) (0 52 54) 9 30 98 – 0

Факс: (+049) (0 52 54) 9 30 98 – 30

E-mail: info@casada.com

Интернет: www.casada.com

Представительство в России

ООО «Альфа БиСи»

Интернет: www.casada.ru

Авторское право

На фотографии и текст распространяется авторское право компании «Casada Group GmbH».

Они не могут использоваться без специального подтверждения.

Авторское право © 2008 «Casada Group GmbH»

Все права защищены.

time to *relax*

WITH CASADA

